

已为您提供下面的一个或多个容器：

Cary Blair 氏粪培养运送培养基（粉色液体）  
固定用 SAF，粪便运送培养基（寄生虫及虫卵检测用）（透明液体）  
干净小瓶（无液体）


不要弃去液体。  
装满所有提供的容器。



1 如需要，可先小便至马桶内。



5 在含液体的容器内：加入 2-3 勺粪便直至液面升至“填满线”。盖紧盖子。在空的干净容器内（如有提供）：加入粪便至“填满线”，盖紧盖子。

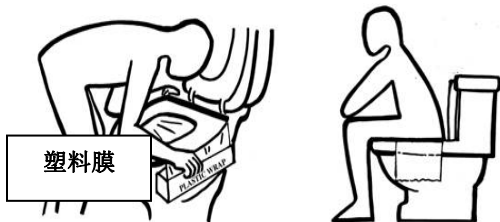

2 抬起马桶座圈。将塑料膜（例如保鲜膜™）扑在厕缸上，中心处留出低洼处。将马桶座圈放下。排便至塑料膜上。



6 摇动含有液体容器去混合内容物。



或者



3 或者，使用干净的厕缸或已灭菌的便盆。请勿让尿液或水接触粪便样本。



7 用肥皂和清水洗手。在每个容器上注明姓名、出生日期或医保卡编号以及采集日期和时间。将容器放入塑料袋中并密封。



4 使用连在盖子上的小勺，将粪便中如带有血状或黏液/白色（粘膜）的区域置入容器中。不要填装过满。



8 在采集后 24 小时内将容器带回实验室。延迟可能会影响检测结果。样本在带回实验室之前，按以下方法储存：  
培养物（粉色液体）——冻存  
SAF（清澈液体）——室温  
干净小瓶（无液体）——冻存